



Arise



OXFORD

INNOVATE.
BUILD FOR THE FUTURE



Arise



El modelo de grúa Arise forma parte de la gama de grúas hospitalarias de alto nivel de Oxford.

Está especialmente diseñada para realizar transferencias de una manera sencilla, segura y rápida.

Se complementa con una gama de arneses de alta calidad, muy fáciles de utilizar y de ajustar, indicados para los siguientes procesos del cuidado diario de un paciente:

- Aseo
- Incorporación
- Paseos rehabilitadores
- Transferencias

La Arise es una grúa que permite mover al paciente desde una posición de sentado hasta incorporarlo totalmente.

Con unas altas prestaciones entre las que destacan su estructura de aluminio y su alto rango de elevación.

Soporte para las piernas regulable

El soporte para las piernas es regulable en altura, así se puede ajustar al paciente que se sentirá más cómodo y seguro durante la incorporación y posterior traslado.

Además el almohadillado tiene forma especialmente diseñada para alojar las piernas, que así se mantendrán en su correcta posición evitando movimientos no deseados.



Arise

Base para los piés desmontable




La base donde se colocan los piés se puede retirar; así el paciente puede caminar apoyándose en la grúa y desplazándola con cada paso que da, como si fuera un andador. Esto es especialmente útil en sesiones de rehabilitación para pacientes con movilidad reducida.

Empuñaduras para mejor sujeción



El paciente puede agarrarse a las empuñaduras acolchadas y ergonómicas, que le ayudan a aumentar la sensación de seguridad y confianza mientras le trasladan en la grúa.

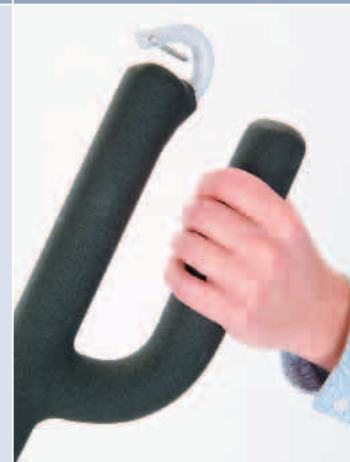

**INNOVATE.
BUILD FOR THE FUTURE**

Arise

Especificaciones Técnicas de la grúa Arise

Medidas	
Peso máx paciente	170 kg
Longitud total máxima	1370 mm
Longitud total mínima	1300 mm
Altura total máxima	1720 mm
Altura total mínima	1120 mm
Radio de giro	1420 mm
Patatas abiertas - Anchura externa	1030 mm
Patatas abiertas - Anchura interna	890 mm
Patatas cerradas - Anchura externa	630 mm
Patatas cerradas - Anchura interna	510 mm
Altura total patatas	120 mm
Distancia de la parte inferior de la pata al suelo	35 mm
Ruedas delanteras	100 mm
Ruedas traseras	100 mm

Pesos	
Peso total	52 kg
Mástil, brazo y percha	49,5 kg
Baterías	3 kg
Conjunto base (sin baterías)	19 kg
Mástil y percha (sin baterías)	23,5 kg

Especificaciones eléctricas

Baterías 2x12V , recargables

Baterías 3.2 Amph

Corriente de entrada cargador 230Vac 50/60Hz

Corriente de salida cargador 27,4/29.0 VDC@0.8A

Protección eléctrica

Cargador-clase II

Grúa-Fuente de alimentación interna

Nivel de protección

Cargador-Tipo B

Grúa-Tipo B

Temperatura adecuada: >+5° <+40°

El buen funcionamiento puede verse alterado en condiciones diferentes a las especificadas.



KNOWLEDGE FOR THE FUTURE

2005 Sunrise Medical
0105/000690270.ES/SD
Rev. A



Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola 41
48498 Arrankudiaga Vizcaya
Tel.: +34 (0) 902 14 24 34
Fax: +34 (0) 946 48 15 75
www.sunrisemedical.com



**INNOVATE.
BUILD FOR THE FUTURE**