



WHERE YOU WANT TO BE.

Elite² Plus Elite² XS





Elite² Plus Elite² XS

Confort, velocidad
y rendimiento en
exteriores



Elite² XS de 3 ruedas
Con cesta frontal de serie



Elite² Plus de 3 ruedas
Con cesta frontal de serie
(Reposacabezas opcional)





Conducción agradable y máxima seguridad en la carretera

Elite² Plus y Elite² XS son 2 robustas scooters de exteriores de 3 ruedas, compañeras ideales para un viaje seguro y confortable. Con suspensión delantera y trasera, velocidad máxima de 15 km/h y homologadas para usuarios de hasta 175 kg.

Máxima seguridad

Para garantizar la **máxima seguridad** en la carretera, las scooters Elite² Plus y Elite² XS incorporan de serie luces de LED, freno de mano y ruedas antivuelco.

Ambas se caracterizan por su **robusta estructura**, que hace que estén **homologadas para usuarios de hasta 175 kg.**

Además ambas han superado con éxito las pruebas de colisión conforme a la normativa ISO 7176-19, que las acreditan como **asiento seguro durante el transporte en un vehículo**, utilizando un sistema de retención de 4 puntos.



Potencia y velocidad para exteriores

Ambos modelos vienen equipados de serie con **ruedas grandes**, **parachoques** trasero y **suspensión** tanto en las ruedas delanteras como en las traseras para garantizar una conducción suave y confortable en terrenos irregulares. Además garantizan una gran potencia gracias a sus **baterías de 70 Amp** y permiten alcanzar una **velocidad máxima de hasta 15 km/h.**

Y una conducción agradable...

...gracias al **asiento acolchado** de gran calidad, **giratorio 360°** y ajustable en altura y profundidad.

El **manillar** puede también **ajustarse en ángulo** para facilitar las transferencias y encontrar la postura que más cómoda le resulte al usuario. Además los **reposabrazos** pueden regularse en ángulo y son **abatibles** para facilitar la entrada/salida de la scooter.

Con una práctica **cesta delantera y compartimento** en la parte inferior del manillar para transportar objetos.



Manillar ajustable que asegura el confort y una buena postura durante la conducción.



Elite² Plus



Con cesta frontal de serie
(Reposacabezas opcional)

Conducción de alto nivel, con la mejor suspensión

Deja las preocupaciones en casa!! Sterling Elite² Plus ha sido diseñada para que disfrutes de tu viaje con **total comodidad**. Equipada con **ruedas grandes de 14"**, velocidad máxima de 15 km/h, un avanzado sistema electrónico y **suspensión trasera hidráulica ajustable**. La scooter incorpora además **amortiguación delantera**, que ayuda a absorber las irregularidades del camino y **frenos de disco** para un mayor confort y precisión en el frenado.

El manejo es muy intuitivo y sencillo. El manillar, que es ajustable en altura 5 cm, dispone de una **amplia pantalla LCD** donde el usuario puede visualizar parámetros como la velocidad, la carga de las baterías, la temperatura ambiente, las horas de conducción, e incluso los kilómetros recorridos.

A través de los botones del cuadro puede controlar los perfiles de conducción (interiores/exteriores), las luces y los indicadores.



Visibilidad garantizada gracias a las luces de LED; luces delanteras y traseras, indicadores y luces de frenado.



Guardabarros, ruedas antivuelco y parachoques trasero de serie.



Ruedas grandes de 14" con llanta de aluminio y alto perfil para incrementar la tracción. Amortiguación delantera y frenos de disco.



Empuñadura ergonómica, (tipo volante) con pantalla LCD multi-función y cómodos pulsadores.



Elite² Plus ofrece unos resultados de conducción inmejorables gracias a su avanzado sistema de suspensión, que permite un movimiento de hasta 85 mm en la suspensión trasera y 50 mm en la delantera.



Elite² XS



Con cesta frontal de serie

Velocidad y confort en scooter de 3 ruedas

Sterling Elite² XS cumple con los estándares más exigentes en cuanto a diseño y prestaciones para que disfrutes de tus paseos al aire libre con total **seguridad** y sin renunciar al **confort**.

Equipada de serie con suspensión delantera y trasera y **ruedas de 13"**, Elite² XS garantiza un paseo agradable y una conducción suave en terrenos irregulares, permitiendo alcanzar una **velocidad máxima de hasta 15 km/h**.

Con **asiento acolchado** de gran calidad y **múltiples ajustes** para que el usuario pueda encontrar en todo momento la posición que le resulte más cómoda.



Visibilidad garantizada gracias a las luces de LED; luces delanteras y traseras, indicadores y luces de frenado.



Suspensión trasera ajustable, guardabarros, ruedas antivuelco y parachoques trasero de serie.



Ruedas delanteras de 13" con amortiguación delantera para una conducción más cómoda.




Amplias empuñaduras ergonómicas y palanca de control manejable con un dedo. Manillar ajustable en ángulo para asegurar el confort y una buena postura durante la conducción.



Asiento acolchado, giratorio 360°, ajustable y con soporte lateral lumbar. Extensión de respaldo opcional.

Elite² Plus / Elite² XS

Confort, velocidad y rendimiento en exteriores

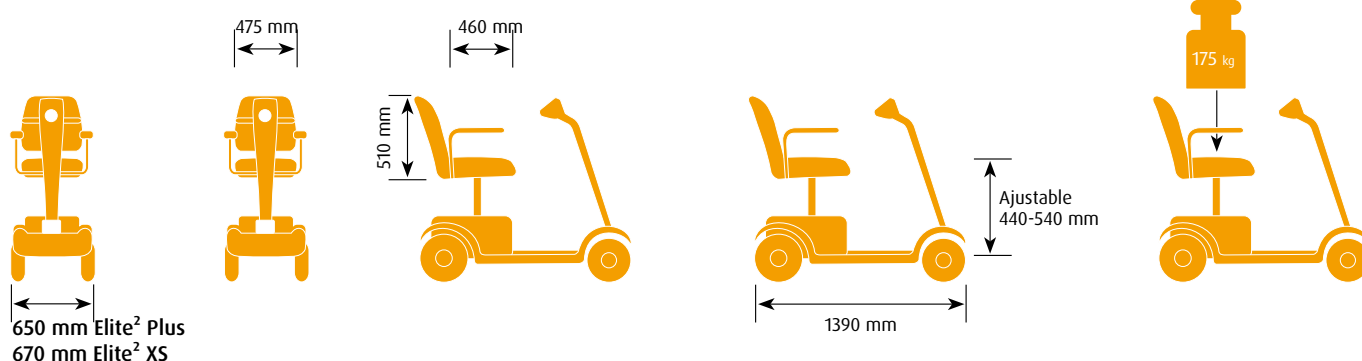

Especificaciones técnicas

	Elite ² Plus 3 ruedas	Elite ² XS 3 ruedas		Elite ² Plus 3 ruedas	Elite ² XS 3 ruedas
Anchura total	650 mm	670 mm	Peso total	140 kg	132 kg
Longitud total	1390 mm	1390 mm	Peso de las baterías (unidad)	23 kg	23 kg
Altura de asiento ajustable	440 - 540 mm	440 - 540 mm	Peso del asiento	17 kg	17 kg
Profundidad de asiento	460 mm	460 mm	Radio de giro	1400 mm	1400 mm
Anchura de asiento	475 mm	475 mm	Pendiente máxima de seguridad	15°	15°
Altura de respaldo	510 mm	510 mm	Distancia de la base al suelo	135 mm	135 mm
Velocidad	15 km/h	15 km/h	Ruedas delanteras	14" macizas	13" macizas
Baterías	70 Amp	70 Amp	Ruedas traseras	14" macizas	13" macizas
Autonomía máxima*	44 km*	44 km*	Luces e Indicadores	Si	Si
Color	Azul	Azul	Bordillos	Máx 100 mm	Máx 100 mm
Peso máx. usuario (incl. cargas adicionales)	175 kg	175 kg			

Tolerancia de fábrica: +/- 1 cm

* Autonomía calculada bajo condiciones de ensayo. El peso del usuario, el terreno, el uso y las condiciones meteorológicas pueden afectar a su rendimiento.

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso



Sunrise Medical S.L

Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga, Vizcaya
Tel.: 902 14 24 34
Fax: 94 648 15 75

www.SunriseMedical.es