

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTÁNDAR	CORPUS	CS	MINIFLEX
Longitud del reposabrazos	1260 - 1460 mm	1260 - 1460 mm	1260 - 1460 mm
Anchura	720 mm	720 mm	720 mm
Longitud de transporte mínima	1260 mm	1260 mm	1260 mm
Altura de asiento elevador fijo	560 mm	550 mm	530 mm
Altura de asiento con elevador eléctrico	560 - 760 mm	550 - 750 mm	530 - 730 mm
Peso incluyendo batería	190 kg	182 kg	170 kg
Peso máximo del usuario	136 kg	136 kg	35 kg
Anchura de asiento	430 y 480 mm	450 mm	250/300/350 mm
Profundidad de asiento	310/410/460/510 y 560 mm	430 mm	250/300/350 mm
Altura del respaldo	535/605 mm	520 mm	325,375 y 425 mm
Anchura del respaldo	340/390 y 440 mm	n/a	250/300 y 350 mm
Altura del reposabrazos	regulable	regulable	regulable
Longitud del reposabrazos	250/300/350 y 400 mm	n/a	200 y 250 mm
Distancia entre reposabrazos	350/400 y 450 mm	n/a	250 - 350 mm
Ángulo del respaldo - regulable	90° - 130° manual / electr.	90° - 120° manual	90° - 165° manual
Ángulo del reposapiés - regulable	NVT	NVT	90° - 150° manual
Capacidad de la batería	2 x 97 ah	2 x 97 ah	2 x 97 ah
Tiempo de carga	aprox. 11 u.	aprox. 11 u.	aprox. 11 u.
Autonomía	35 - 45 km	35 - 45 km	35 - 45 km
Velocidad máxima	15km/h	15km/h	15km/h
Distancia de frenado	3500 mm	3500 mm	3.500 mm
Radio de giro 180° iso 7176-5	1680 mm	1680 mm	1.680 mm
Capacidad para superar obstáculos	110 mm	110 mm	110 mm
Suspensión	sí	sí	sí
Silla eléctrica elevable	sí, 2000 mm	sí, 2000 mm	sí, 2000 mm
Regulación eléctrica de la inclinación	sí	no	no
Regulación eléctrica del reposapiés	sí	no	no
Regulación eléctrica del respaldo	sí	no	no
Garantía	2 años	2 años	2 años
Distancia asiento a placa reposapiés	340 - 560 mm		130 - 340 mm

APLICACIONES ESTÁNDAR	CORPUS	CS	MINIFLEX
Robustos resortes regulables	*	*	*
Suspensión individual en ruedas delanteras	*	*	*
Tamaño grande de ruedas	*	*	*
Robustos parachoques de goma	*	*	*
Distancia regulable manual/eléctricamente	opcional	opcional	opcional
Asiento basculante en dos direcciones	opcional	opcional	opcional
Electrónica programable sin herramientas en función del uso	*	*	*
El asiento se compone de módulos que se pueden sustituir fácilmente para modificar la altura y anchura de asiento y la altura del respaldo	*		*
Diseño ergonómico del asiento con soporte lumbar y torácico regulable	*		
Color del chasis	negro, rojo y azul	negro, rojo y azul	negro, rojo y azul
Tapizado	eskay o tela	eskay	eskay o tela

FUNCIONES EXTRA	CORPUS	CS	MINIFLEX
Silla eléctrica elevable	*	*	*
Distancia regulable eléctricamente	*	*	*

ACCESORIOS ESTÁNDAR	CORPUS	CS	MINIFLEX
Espejo retrovisor	*	*	*
Portabultos	*	*	*
Bolsa de equipaje	*	*	*
Arco protector	*	*	*
Soporte para taburete/bastón	*	*	*
Reposacabezas regulable	*	*	*
Soporte de los muslos	*	*	*
Soporte del tronco	*	*	*
Soporte del cuello	regulable	*	regulable
cinturón de 4 puntos	*	*	*
Cinturón con hebilla de seguridad de leva	*	*	*
Cinturón auto-extraíble	*	*	*
Cinturón auto-extraíble, largo	*	*	*
Bolsa del reposabrazos	*	*	*
Batería	*	*	*
Cargador	*	*	*

ISO 7176-19 / ISO 10542-3 EN12182/EN12184 CE



The Power of Mobility

www.permobil.com



X850



The Power of Mobility

X850072010ES

X850



X850 CS

X850 Corpus™

X850 Miniflex™

Construida para la conducción en el exterior.

Nuestra resistente silla de exterior más reciente, el modelo X850, no sólo tiene un aspecto atractivo, sino que está diseñada para una conducción más dura. Necesita una silla estable que le lleve a la ciudad o por los campos. Puede que la tienda más próxima esté lejos, lleve su silla de ruedas al trabajo o quiera acompañar a alguien en un paseo en bicicleta. En este caso, es importante que tenga la sensación de tener una silla que sirve para ello.

Con tracción a las ruedas traseras, motor fuerte y suspensión resistente tendrá una silla que le lleve, de modo seguro, a 15km/h. El modelo X850 incorpora una rotación de asiento de 180° que hace que el traslado sea más fácil. Otra novedad es que lleva luces angulares activas que siguen la dirección de conducción, retrovisores con suspensión y parachoques de goma que resisten los pequeños golpes.

Como consideramos que la seguridad es siempre lo más importante, el modelo X850 va equipado con ESP (Electronic Steering Performance) que controla el motor de impulsión y consigue mantener el control en los virajes. Servomando con palanca de control que se puede programar según la necesidad.



The Power of Mobility

www.permobil.com

X850 CS

Los asientos CS ofrecen un diseño cómodo con una forma exclusiva. La rotación del asiento permite que éste gire 90° en ambas direcciones siempre que quiera entrar y salir de la silla. Si ha elegido la elevación del asiento, con sólo pulsar un botón lo subirá 20cm. Si desea parar un momento y descansar, puede reclinar el respaldo manualmente; también es posible abatirlo para el transporte de la silla.



FUNCIONES ELÉCTRICAS



X850 Corpus™

El asiento Corpus ofrece varias funciones eléctricas como opción. El cambio de posición del respaldo y del reposapiés, sólo con el cuadro de mandos, puede resultar ventajoso. También existe la posibilidad de regulación eléctrica de la elevación del asiento, si así lo desea. Igual que con los asientos CS, es posible la rotación de asientos, tanto manual como eléctricamente.



FUNCIONES ELÉCTRICAS



X850 Miniflex™


Su niño puede crecer con el modelo Miniflex. Se puede elegir entre tres anchos y fondos de asiento distintos, además existe el mismo número de opciones de altos y anchos de respaldos. Los asientos son perfectos para niños de hasta 35kg. Elija entre escay o tela y, si es necesario, por supuesto, lo adaptaremos. Como opción está, naturalmente, la elevación del asiento, para subirlo un poco.



FUNCIONES ELÉCTRICAS



COLORES DE CUBIERTA

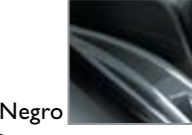

Rojo

Azul

Negro



Regulación manual del respaldo



Suspensión individual resistente



Eje ajustable, a su altura o necesidades
 SVS



Luces multidireccionales activas



Retrovisores con suspensión que no se enganchan en los obstáculos



Enganches para el transporte



Parachoques resistente



LLave para bloqueo en cuadro de mandos



Caja de equipaje fácil de desmontar



Posibilidad de elevación eléctrica de asiento en toda la selección de asientos



Rotación de 180° del asiento, manual o eléctrica



En el modelo Corpus es posible la regulación eléctrica del respaldo Corpus



El arco de seguridad es una opción adicional para sentirse aún más seguro cuando conduzca su hijo